



Método de Naturalização Facial

////// apostila mnf 4 ////


A evolução da Harmonização Facial.

MNF® é um protocolo inovador de naturalização facial, estruturado em três pilares: **segurança, eficácia e praticidade** que visa evidenciar a beleza natural.




estéticotech®

REJUVENESCIMENTO FACIAL COMPLETO

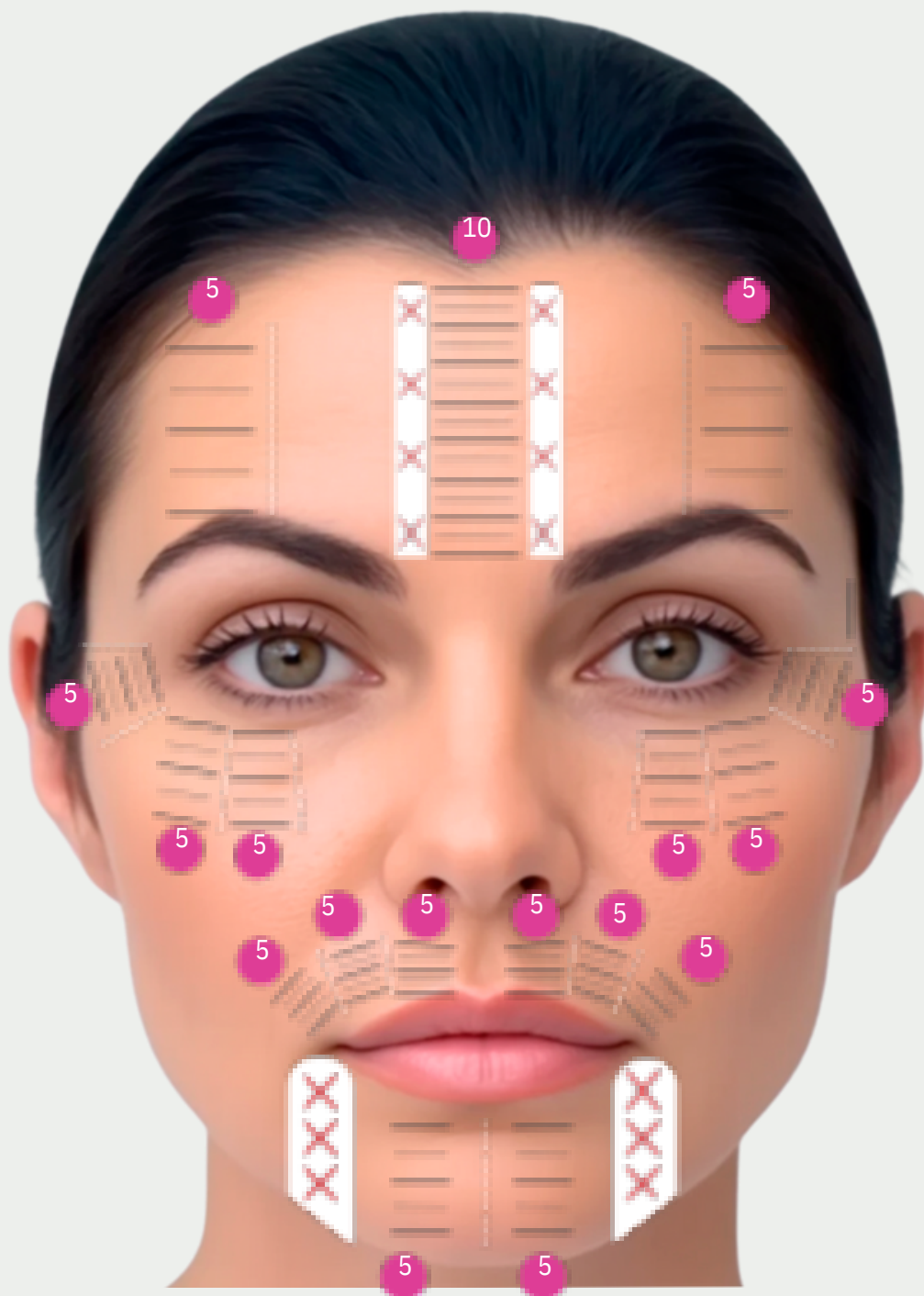


Área	Modo	Ponteira (MPT)	Energia	Espaçamento	Passagens	Disparos
Frontal	Normal		0,3 - 0,6 J	1,5 mm	1	20
	MP		0,3 - 0,6 J	-----	1	0
Ao redor dos olhos	Normal		0,3 - 0,6 J	1,5 mm	1	30/30
	MP		0,3 - 0,6 J	-----	1	0
Ao redor da boca	Normal		0,3 - 0,6 J	1,5 mm	1	20/20
	MP		0,3 - 0,6 J	-----	1	0

- Não aplique o tratamento diretamente nos nervos supraorbitais ou temporais.
- Peça para que os pacientes fechem os olhos no tratamento da região periorbital.
- Ao tratar próximo da linha da sobrancelha, puxe o transdutor de forma mais apertada em direção à testa para reduzir a dor.
- Para aplicações de tratamento com uma passagem, aplique o padrão de tratamento conforme orientado.

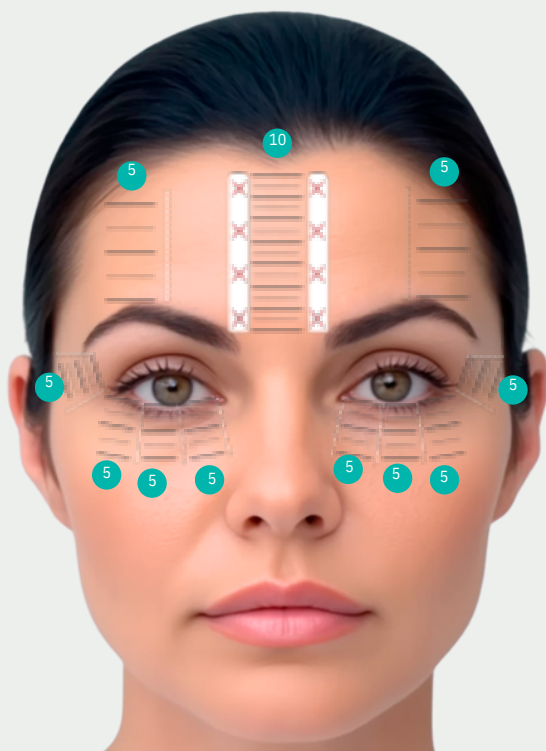

Modo	Ponteira (MPT)	Energia	Espaçamento	Passagens	Disparos
Normal		0,3 - 0,6 J	1,5 mm	1	60
MP	1,5 mm	0,3 - 0,6 J	-----	1	0

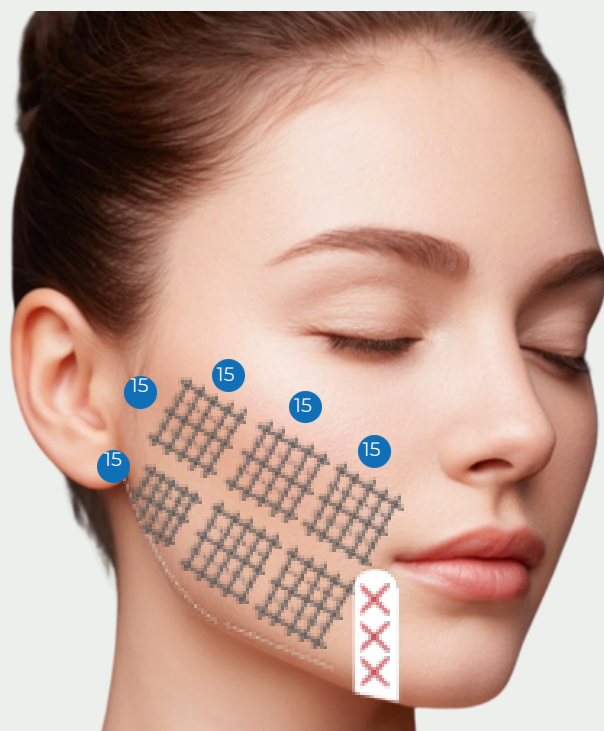


Modo	Ponteira (MPT)	Energia	Espaçamento	Passagens	Disparos
Normal		0,8 - 1,2 J	1,5 mm	1	75/75
MP	4,5 mm	0,8 - 1,2 J	-----	1	0

Contorno do terço inferior da face/linha de marionete




Modo	Ponteira (MPT)	Energia	Espaçamento	Passagens	Disparos
Normal		0,8 - 1,2 J	1,5 mm	1	30/30
MP	3,0 mm	0,8 - 1,2 J	-----	1	20/20
Normal		0,8 - 1,2 J	1,5 mm	1	40/40
MP	1,5 mm	0,8 - 1,2 J	-----	1	0

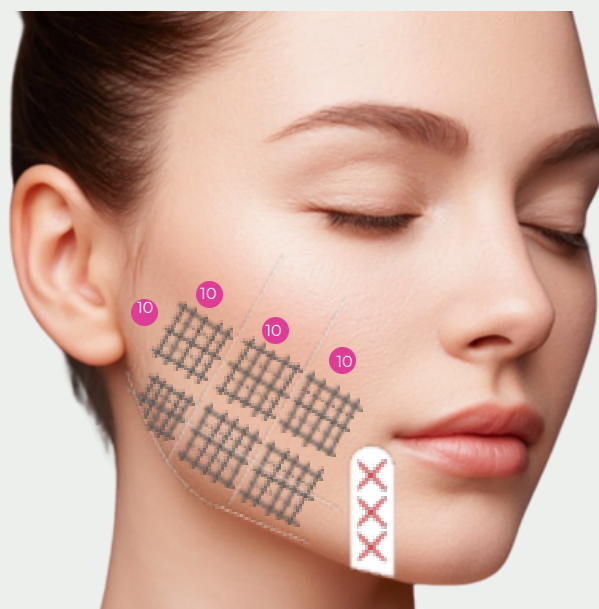

- A ponteira de 3,0mm deve ser aplicado somente em casos com objetivo de diminuir volume facial. Pacientes com rosto mais volumoso. Em pacientes com rosto magro, a ponteira 3,0 mm pode ser substituída pela ponteira 2,0 mm de aplicação pontual. Nesta situação, utilize a energia de 0,8 - 2,0 J.
- Não aplique o tratamento diretamente no nervo mandibular marginal.
- Ao tratar várias camadas, trate da profunda à superficial em ordem sequencial.

Pescoço e Gordura na Papada (submentoniana).

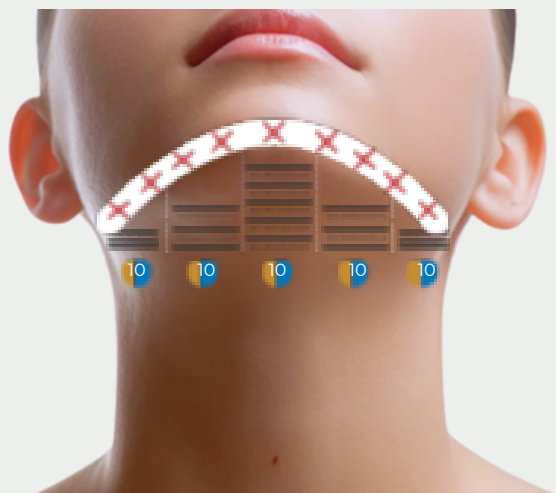

Modo	Ponteira (MPT)	Energia	Espaçamento	Passagens	Disparos
Normal	4,5 mm	0,8 - 1,2 J	1,5 mm	2	40/40
MP	4,5 mm	0,8 - 1,2 J	-----	2	
Normal	1,5 mm	0,8 - 1,5 J	1,5 mm	2	40/40
MP	1,5 mm	0,8 J - 1,5 J	-----	2	

- Não aplique tratamento diretamente no nervo mandibular marginal e na cartilagem tireóidea.
- Não aplique pressão excessiva no pescoço para evitar desconforto durante os procedimentos.
- Ao tratar várias camadas, trate da profunda à superficial em ordem sequencial.
- Para aplicações de tratamento com uma passagem, aplique o padrão de tratamento conforme orientado.

Modo	Ponteira (MPT)	Energia	Espaçamento	Passagens	Disparos
Normal	6,0 mm	0,8 - 1,2 J	1,5 mm	2	50
MP	6,0 mm	0,8 - 1,2 J	-----	2	0
Normal	4,5 mm	0,8 - 1,2 J	1,5 mm	2	50
MP	4,5 mm	0,8 J - 1,2 J	-----	2	0
Normal	3,0 mm	1,0 J	1,5 mm	2	50
MP	3,0 mm	0,8 J	-----	2	0

- A ponteira de **6,0 mm** deve ser utilizada somente em pacientes com grande acúmulo de gordura na papada. Caso não seja utilizada a ponteira **6,0 mm**, utilizar a ponteira **2,0 mm**.
- A ponteira **3,0 mm** pode ser feita no pescoço e/ou papada, depende da região de maior necessidade. Essa ponteira irá estimular colágeno e diminuir um pouco de volume. Caso não seja o objetivo diminuir volume, substitua pela ponteira de **1,5 mm**.



Modo	Ponteira (BOOSTER)	Energia	Espaçamento	Disparos
Normal	1,5 mm	0,5-1,5 J	1,5 mm	0
MP	1,5 mm	0,5-1,5 J	-----	120
Normal	3,0 mm	0,5-1,2 J	1,5 mm	35/35
MP	3,0 mm	0,5-1,2 J	-----	0
Normal	4,5 mm	0,5-1,2 J	1,5 mm	70/70
MP	4,5 mm	0,5-1,2 J	-----	0

- Não aplique o tratamento diretamente no nervo mandibular marginal.
- Ao tratar várias camadas, trate da profunda à superficial em ordem sequencial.
- Ex: 4,5 mm 3,0 mm 1,5 mm
- Para aplicações de tratamento com uma passagem, aplique o padrão de tratamento conforme orientado.

-A ponteira Booster é uma ferramenta para potencializar o tratamento. O aplicador tem liberdade para concentrar mais disparos na região que incomode mais o paciente. **O PROTOCOLO MNF 4 ALCANÇA ATÉ 1150 DISPAROS**
INTERVALO DE 60 DIAS ENTRE AS SESSÕES

Exfoliator e Peeling MNF 4

- Higienizar a pele com sabonete e água;
- Aplicar o Exfoliator 4x, rosto todo, enfatizando nas regiões de pregas, dobras e rugas mais profundas.
- Desengordurar a pele com algodão umedecido com solução de acetona, promovendo fricção na pele.
- Aplicar 4 camadas do Peeling MNF (1,2 até 1,5 ml), espalhando com a luva. Friccionar com a haste de algodão (cotonete) nas regiões com rugas e na base da orelha para lifting facial. Não remover;
- Aplicar o ácido retinóico 7% a 10% para tamponar;
- Remover com 8 horas e iniciar os cuidados.

Exfoliator e Peeling MNF PREVENT

- Aplicar o Exfoliator corretamente, em toda a face, para garantir uma boa permeação do peeling. Principalmente, nos locais mais envelhecidos.
- Aplicar a acetona com leve fricção e mão firme, para ter um bom desengorduramento da pele.
- O peeling é camada dependente, por tanto, as camadas tem que ser aplicadas corretamente, de acordo com a classificação do MNF. Atenção para não deixar nenhum local sem aplicar.
- O retinóico não precisa ser aplicado com camada espessa. Basta uma camada fina para selar o peeling.



Muita atenção na quantidade de peeling utilizada. Não devem ser utilizadas quantidades maiores do que as que estão nos protocolos. A uniformidade e padronização na realização do protocolo é fundamental.

Home care MNF4 - Paciente - Uso tópico

1) Hidratante Ureadin 10% - Loção 100mL ou Cetaphil Pro Ureia 10% - Loção Hidratante 120mL. Pela manhã, passar o hidratante no rosto, pescoço e colo, e o filtro solar por cima. A noite passar o hidratante, no rosto, colo e pescoço, durante 14 dias.

Usar hidratante em abundância.

2) N acetilglucosamina 8% qsp creme lanete 30 G

3) Fórmula :

Ácido glicólico 12% - pH 2.

Gel/creme qsp - 30g

Modo de Usar: A partir do 15º dia, aplicar a N acetilglucosamina I no rosto, pescoço e colo, à noite. Alternando com a fórmula 3 (ácido) no rosto, pescoço e colo, à noite.

Uso contínuo.



Método de Naturalização Facial

estéticatech[®]